


VarioMent Plus



Signalisiert das Verlassen eines Raumes, z.B. durch eine demente Person



Der **VarioMent Plus** wird an die Außenseite einer Tür auf die Türklinke montiert.

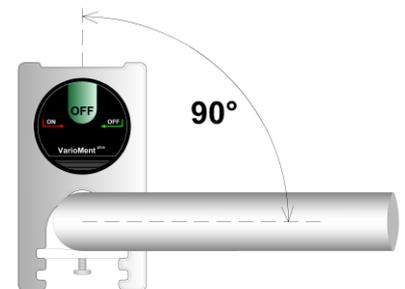

Bei Betätigung der Tür durch die zu überwachende Person wird ein Signal zur Rufauslösung an den zugehörigen Funkempfänger weitergeleitet.

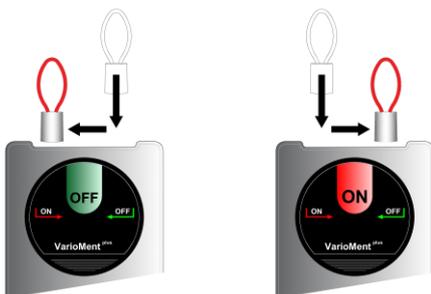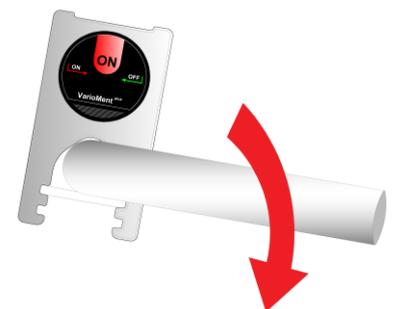

Die Pflegekraft kann über einen Magnetschlüssel die Tür ständig oder temporär freigeben, so dass diese ohne Rufauslösung geöffnet werden kann.


Technische Daten:

Bauart: Türwächter
Frequenz: 869 MHz
(Sozialalarmfrequenz)
Schutzart: IP 40
Maße: ca. 53x95x21 mm (BxHxT)
Gewicht: 115 g



Pflegesender VarioKey

z.B. als kurzzeitige Türfreigabe für Personal

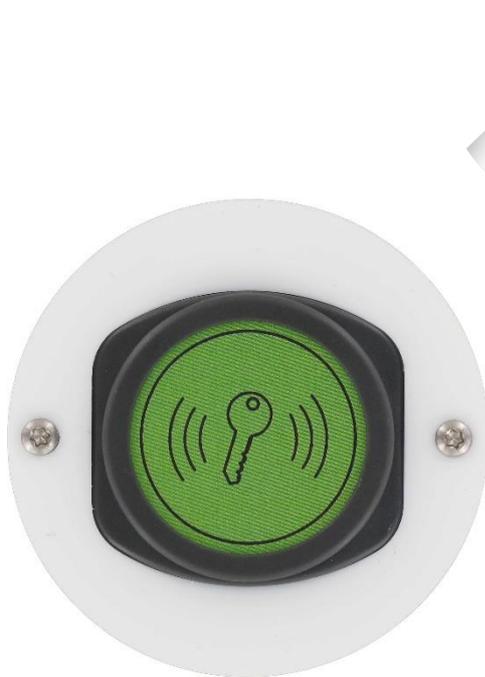

Der **VarioKey** ist eine spezielle Funktaster-Version mit einer Auslösung des Funkrufs über einen berührungslosen Magnetschlüssel.

Anwendungsbeispiel in Verbindung mit dem **VarioMent Plus** oder **VarioDoor**: für eine definierte Zeitspanne ist der Durchgang einer überwachten Tür für das Personal freigegeben (es wird kein Ruf ausgelöst).

Durch die Aktivierung per Magnetschlüssel ist dies nur durch autorisierte Personen möglich.

Weitere Anwendungsbereiche sind überall dort, wo Personal und nicht der Patient oder die zu betreuende Person eine Pflegezeit aktivieren, eine Rufabstellung vornehmen, oder evtl. auch einen Notruf auslösen soll.

Technische Daten:

Betriebsfrequenz:	869 MHz (Sozialalarm-Frequenz)
Batterieüberwachung:	„Batterie schwach“-Meldung mit Funkweiterleitung
Tagesüberwachung:	in Ausführung 869 MHz mit täglicher Testmeldung nach EN 50134
Auslöser:	große sensitive Fläche mit 35 mm Durchmesser, Aktivierung über Magnetschlüssel
Anzeige:	rote LED bei Rufanzeige, gelbe LED bei „Batterie schwach“
Stromversorgung:	3 V Knopfzelle CR2032, typische Betriebsdauer 3 Jahre
Abmessungen:	74 x 14 mm (ØxT)
Gewicht:	ca. 35 g
Schutzart:	IP 68 (wasserdicht)